

CONSULTORIO
S500 

Una tecnología adaptada a su talento



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

GNATUS 

S500



SENSOR DE PROXIMIDAD

El **S 500** presenta un exclusivo sensor de proximidad que permite el accionamiento del reflector y el ajuste de la intensidad de la luz sin contacto de las manos, disminuyendo los riesgos de contaminación cruzada y permitiendo que el profesional ajuste la iluminación de acuerdo con la necesidad del procedimiento.



SENSOR DE PROXIMIDAD

El **S 500** presenta un exclusivo sensor de aproximación, que acciona automáticamente el flujo de agua en la escupidera proporcionando más practicidad, comodidad para el paciente, seguridad y economía de agua.

SILLÓN

En la línea de sillas Gnatus, encuentra atributos que privilegian el bienestar del paciente y del profesional. Porque comodidad también es fundamental para realizar cualquier procedimiento clínico.



POSICIONES:



Silla elevada



Silla bajada

- Amplio tapizado con apoyo lumbar;
- 1 brazo fijo y un brazo plegable con las estructuras internas de acero;
- Base construida en acero plenamente protegida por ribete antideslizante, que proporciona una perfecta estabilidad;
- Caja de conexión integrada;
- El sillón S 500 está equipado con movimiento sincronizado entre asiento y respaldo con posición de Tredelenburg.

VENTAJAS Y DIFERENCIALES

- Caja de conexión integrada;
- No requiere fijación al suelo;
- Base con bornero antideslizante.



APOYO DE CABEZA BIARTICULADO

Apoyo de cabeza biarticulado, anatómico y desmontable, para proporcionar un alojamiento perfecto del paciente. El movimiento anteroposterior, con ajuste de altura, permite la visualización directa de todos los cuadrantes de la boca. Facilita la atención en odontología pediátrica y pacientes discapacitados.



SISTEMA EASY-FIX

Las bases para apoyo de los pies del paciente y del profesional son removibles, proporcionando mayor facilidad para higienización.

El sistema Easy-fix permite la remoción de las tapicerías de los respaldos y de la cabeza para una mejor higienización.



PLÁSTICO CRISTAL

Para proteger el asiento en los pies*.



SISTEMA ANTI APLASTAMIENTO

Base del sillón con sistema de seguridad que impide los movimientos al tocar cualquier obstáculo.



BRAZO DEL SILLÓN AUTOMÁTICO

Al accionar la posición de "vuelve a cero" el brazo del sillón baja automáticamente, privilegiando la ergonomía, facilidad de acceso del paciente y productividad al profesional.

MÓDULO DENTAL H

TU DÍA A DÍA CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA.

La línea Gnatus ofrece todo lo que los profesionales de odontología necesitan al realizar prácticas clínicas con la tecnología, ergonomía y durabilidad requerida en el día a día.



VENTAJAS Y DIFERENCIALES

- Apoyo de piezas de mano;
- Panel de comando PAD;
- Permite hasta 5 terminales de trabajo.



Soporte de piezas de mano extraíble y autoclave.



Accionamiento de la traba neumática situada bajo la perilla del módulo.



Sistema de bloqueo de varillas

Alivia la tensión en los tubos con mayor movilidad en las piezas de mano*.



Panel de comando PAD con los siguientes accionamientos:

1. Ascenso y descenso del asiento y del respaldo.
2. Bloqueo del movimientos del sillón, con indicación de luz de emergencia.
3. Programación de trabajos (P1, P2, P3 y P4).
4. Regreso a la posición cero.
5. Accionamiento del reflector
6. Activación del Sistema Bio system.
7. Activación del Negatoscopio LED.
8. Programación del flujo en la escupidera y portavasos.
9. Posición de salivar y retorno a la última posición.
10. MME inversión [opcional].
11. Brazo del sillón automático



Negatoscopio LED

- Ampio campo de la iluminación para una mejor visualización de periapicales y oclusales;
- Iluminación LED uniforme y blanco.

* Bloqueo no disponible en la jeringa.


CONTROL PEDAL

PEDAL DE CONTROL INTEGRADO

El **S 500** cuenta con también un modelo opcional de pedal de mandos que contempla en un único ítem los movimientos de la silla y el accionamiento de las piezas de manos; permitiendo incluso trabajos a seco a través de la función "chip blower".

VENTAJAS Y DIFERENCIALES

- Todas las funciones integradas en un único pedal;
- Varilla velocidad para un mayor control de la aceleración;
- Función "Chip Blower" para cortar el flujo de agua.

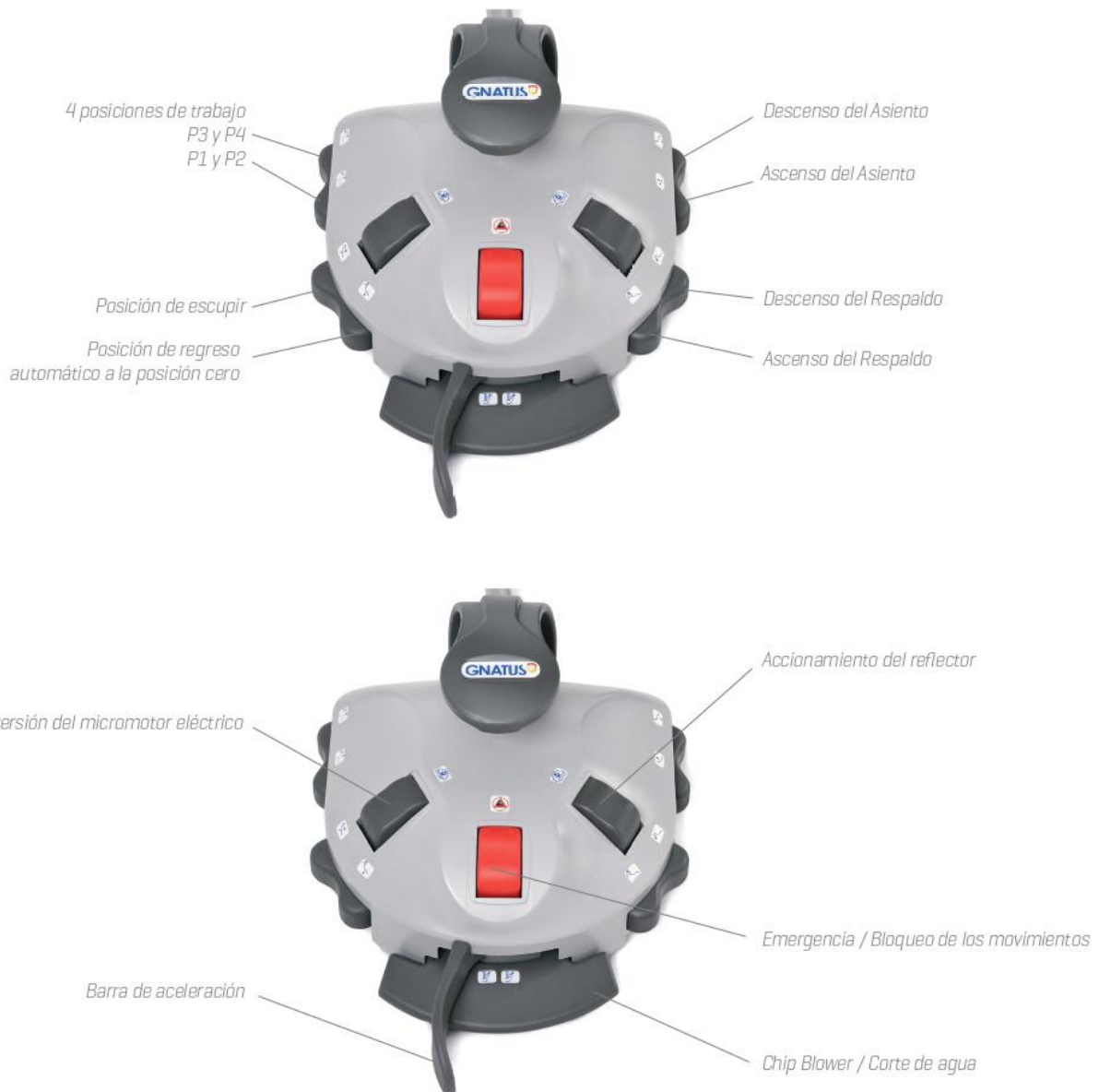

* Opcionales.

SIRIUS SENSOR LED DENTAL LIGHT



REFLECTOR SIRIUS SENSOR LED



TECNOLOGÍA CONTEMPLADA BAJO TODOS LOS ÁNGULOS

La línea de reflectores Gnatus cuenta con diferenciales que permiten, al profesional, un campo de visión más nítido, además de privilegiar un diseño único y funcional.



MOVIMIENTO ORBITAL

Permite ángulos diversos en la iluminación del campo operatorio.

MODELO

3 LEDs - con intensidad de iluminación en 30, 20 y 10 mil lux.

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED

Proporciona mayor duración de la fuente de luz - arriba de 50.000h - cerca de 1.000 veces mayor que las lámparas halógenas convencionales.

DISEÑO INNOVADOR

Cuerpo más robusto y de fácil higienización.

VENTAJAS Y DIFERENCIALES

- Foco rectangular;
- Sensor de proximidad;
- Accionamiento y ajuste de la intensidad de luz sin contacto.



PERILLAS AUTOCLAVABLES Y EXTRAÍBLES

Diseño ergonómico y fácil extracción.



PROTECTOR DELANTERO

Extraíble, construido en material resistente, transparente y fácil de limpiar.




SENSOR DE PROXIMIDAD

Permite el accionamiento del reflector y el ajuste de la intensidad de la luz sin contacto de las manos.



POSICIONAMIENTO DE LAS PERILLAS

Sistema que permite el posicionamiento de las perillas en distintas posiciones.

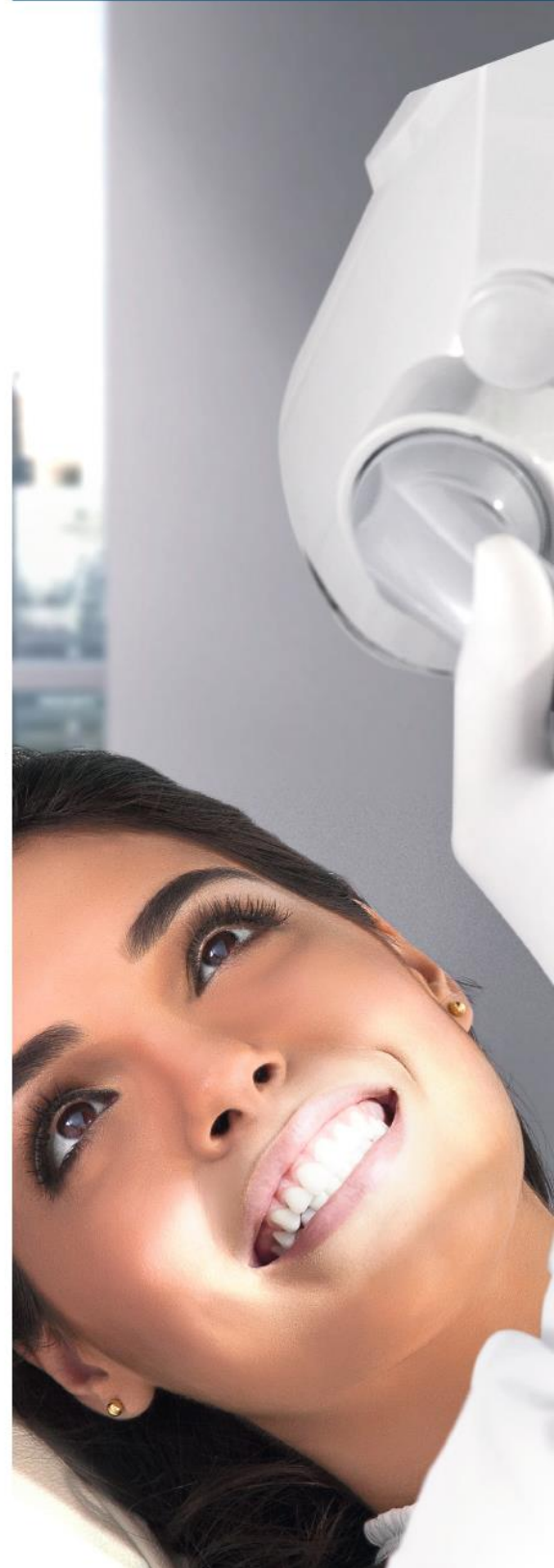

UNIDAD DE AGUA

FUNCIONALIDAD CADA VEZ MÁS NÍTIDA, EN TODOS LOS SENTIDOS.

La línea de consultorios Gnatus aprecia la comodidad y el bienestar, tanto del profesional como del paciente. Con un diseño diferenciado y ergonómico, cada detalle de la Unidad de agua se pensó para quién anhela el máximo desempeño.



SENSOR DE PROXIMIDAD

S 500 cuenta con su sensor de proximidad único que activa automáticamente el flujo de agua en la escupideira, proporcionando una mayor comodidad, confort a los pacientes y el ahorro de agua.

VENTAJAS Y DIFERENCIALES

- Sensor de proximidad;
- Unidad de agua plegable;
- Fácil acceso al filtro de desechos.



Unidad de agua plegable 60°

Con el cuerpo superior diseñado para ofrecer una mejor posición de escupir, sirviendo a la mayoría de los biotipos de pacientes.



Cuba extraíble

Profunda y puede quitarse fácilmente para la higiene y asepsia.



Filtro de residuos

Fácil acceso, extracción y limpieza.

Jeringa Triple*



Brazo alcance

Amplia movilidad que permite aproximación al campo operatorio. Configurable con hasta 5 terminales.

Válvula Máster (llave para corte de agua y aire*).

Sistema doble para alimentación de agua (Red/Reservorio*).



Regulación del flujo de agua en la escupidera y del llena vaso.



Botón de accionamiento del flujo de agua de la escupidera;

Accionamiento del flujo de agua en recipiente.

Calefacción del agua para la jeringa triple*.

*Opcionales



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

GNATUS

ASVADENT. C/Padre Aller, 26 Oviedo. C/Dr. Moreno, 12 Valladolid. C/Núñez Morgado, 5 Madrid
Llámanos al 677 412 162 o escríbenos un WhatsApp al 673 323 624 o un email a marketing@asvadent.es

